

ВАША ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА – НАША ЦЕЛЬ



Karl Kaps

Кольпоскопы

Высокие требования –
оригинальные решения

От стандартных кольпоскопов
до HD-видео кольпоскопов



Kaps KP 3000

На мобильной стойке



Kaps KP 3000 с наклонным тубусом
на мобильной стойке

Kaps KP 3000 – идеальный кольпоскоп для ежедневных рутинных обследований. Совместно с дополнительными аксессуарами он отвечает высоким стандартам качества при привлекательной цене.

Данный кольпоскоп удобен в использовании, имеет широкий спектр показаний для применения в медицинской практике, а также может быть дополнен большим количеством дополнительных аксессуаров.

Если Kaps KP 3000 оснащен интегрированной видеокамерой, вы получаете видео-кольпоскоп для надежного документирования результатов обследования.

Широкий ассортимент аксессуаров

- Мощное светодиодное освещение
- Одно- или трехступенчатое увеличение
- На выбор прямой или наклонный тубус
- Сменные объективы и окуляры
- Т-образная ручка может монтироваться с обеих сторон
- Выводимый зеленый фильтр

Kaps KP 3000 S

Монтируенный на гинекологическое кресло

На выбор Kaps KP 3000 на мобильной стойке или KP 3000 S, фиксируемый на гинекологическое кресло.

KP 3000 S может быть оснащен различными ручками и установлен справа или слева на любом из доступных гинекологических кресел или кушеток.

Точная установка обеспечивается комбинацией прямого и поворотного плеча. Это гарантирует удобное и быстрое использование. Когда колпак не используется, он может быть отодвинут в сторону, а благодаря поворотному плечу он занимает очень мало места.



Кресло для осмотра MUS4000 V
производства:
medifa-hesse GmbH & Co. KG

Kaps KP 3000S с прямым тубусом и Т-образной ручкой,
монтируемый на гинекологическом кресле.

Kaps SOM 52

На мобильной стойке



Kaps SOM 52 с наклонным тубусом
на мобильной стойке

Благодаря мобильной стойке **SOM 52** может использоваться в любом кабинете. Кольпоскоп Kaps SOM специально адаптирован для повседневной работы на гинекологическом приеме и успешной диагностики и лечения.

Эргономичный дизайн обеспечивает работу без усталости. Высококачественная оптика гарантирует четкое трехмерное изображение, а большая глубина резкости повышает точность диагностики.

Модульная система

Создайте собственный кольпоскоп под свои индивидуальные нужды. Модульная система позволяет легко адаптировать кольпоскоп под конкретное применение с помощью дополнительных аксессуаров.

Разумеется, кольпоскопы SOM могут быть дополнительно оснащены камерой, видеосистемой или эндоскопической камерой, а также адаптированы для работы с лазером.

Широкий ассортимент аксессуаров

- На выбор различные системы освещения
- Выводимый зеленый фильтр
- 3-х, 5-ти ступенчатое увеличение или плавный зум
- На выбор прямой или наклонный бинокулярный тубус
- Сменные объективы и окуляры
- Начиная с 5-кратного увеличения дополнительно доступна ирисовая диафрагма для увеличения глубины резкости
- Моторизированная версия (увеличение и фокус)
- Интегрированная видеосистема «Vision»
- Адаптация под лазерные системы ведущих производителей

Kaps SOM 42

Монтированный на гинекологическое кресло

Кольпоскоп **SOM 42** монтируется на гинекологическом кресле, может быть оснащен различными ручками и установлен справа или слева на любом из доступных гинекологических кресел или кушеток.

Точная установка обеспечивается комбинацией прямого и поворотного плеча. Это гарантирует удобное и быстрое использование. Когда колпоскоп не используется, он может быть отодвинут в сторону, а благодаря поворотному плечу он занимает очень мало места.



Kaps SOM 42 с прямым тубусом и Т-образной ручкой,
монтированный на гинекологическом кресле.

Аксессуары Kaps для стереокольпоскопов

Мощный и надежный



Фототубус для
DSLR камеры



HD-фотоадаптер
для Sony



HD-видео аксессуары



LEDone



дополнительное
светодиодное освещение

Видео- и фотодокументация для оптических кольпоскопов серии KP и SOM

С помощью дополнительного фото- и видеооборудования стандартные кольпоскопы могут быть усовершенствованы до полноценных фото- и видеокольпоскопов, идеальных для диагностики и документирования результатов медицинского обследования.

- **Фото-тубус Kaps для камеры DSLR**

Высококачественная оптика с многослойным антибликовым покрытием для получения качественного не искаженного полноразмерного изображения на цифровой камере Canon и Nikon.

- **Фото адаптер Kaps HD для SONY NEX-5/-6/-7 и Alpha 5000/6000**

Документация результатов обследования в HD-качестве с помощью апохроматической оптики для получения полноформатных изображений в естественном цвете с поразительной точностью деталей

- **Аксессуары Kaps HD для видео документации**

Широкий выбор аксессуаров для видео документирования. Просьба обращаться за актуальной информацией к дилеру.

Светодиодное освещение

Усовершенствуйте ваш кольпоскоп! Большая интенсивность белого света благодаря светодиодному освещению значительно улучшает контрастность изображения, что приводит к более точной диагностике

- **Kaps LEDone для KP3000 и 3000S**

Автономный источник освещения по привлекательной цене для легкой и качественной работы при естественном дневном освещении

- **Kaps LED для SOM 42+52**

Доступный комплект оптимального светодиодного освещения для легкой и качественной работы при естественном дневном освещении (доступен для всех моделей с холодным светом начиная с серийного номера 6000)

Kaps Media Work Station BE

для простой документации

Kaps Media Work Station BE упрощает каждодневную рутинную работу в клинике. Мы организовали хранение ваших фото- и видеоматериалов легко и эффективно в специальной электронной медицинской карте

Программное обеспечение представлено на нескольких языках, имеет интуитивный интерфейс и очень простое в использовании

Управление


- Данные о пациенте, изображения и комментарии к ним хранятся в структурированной базе данных.
- Автоматическое присвоение пациенту идентификационного номера
- Функции поиска и сортировки пациентов в базе данных
- Функция поиска текста целиком
- Автоматическое резервное копирование с определенным временным интервалом

Исследования

- Несколько изображений на одном экране в процессе записи
- Возможность контроля записи с помощью педали
- Возможность перемотки видео и удобная панель для индивидуальной установки временных интервалов.
- Возможность ввода диагностических комментариев

Документирование

- Графические метки для выделения результатов исследования
- Автоматическое создание настраиваемого отчета с изображениями в формате html
- Автоматическая обрезка черных рамок в распечатках
- Непосредственная печать изображений с внесенной информацией о пациенте и другими дополнительными данными

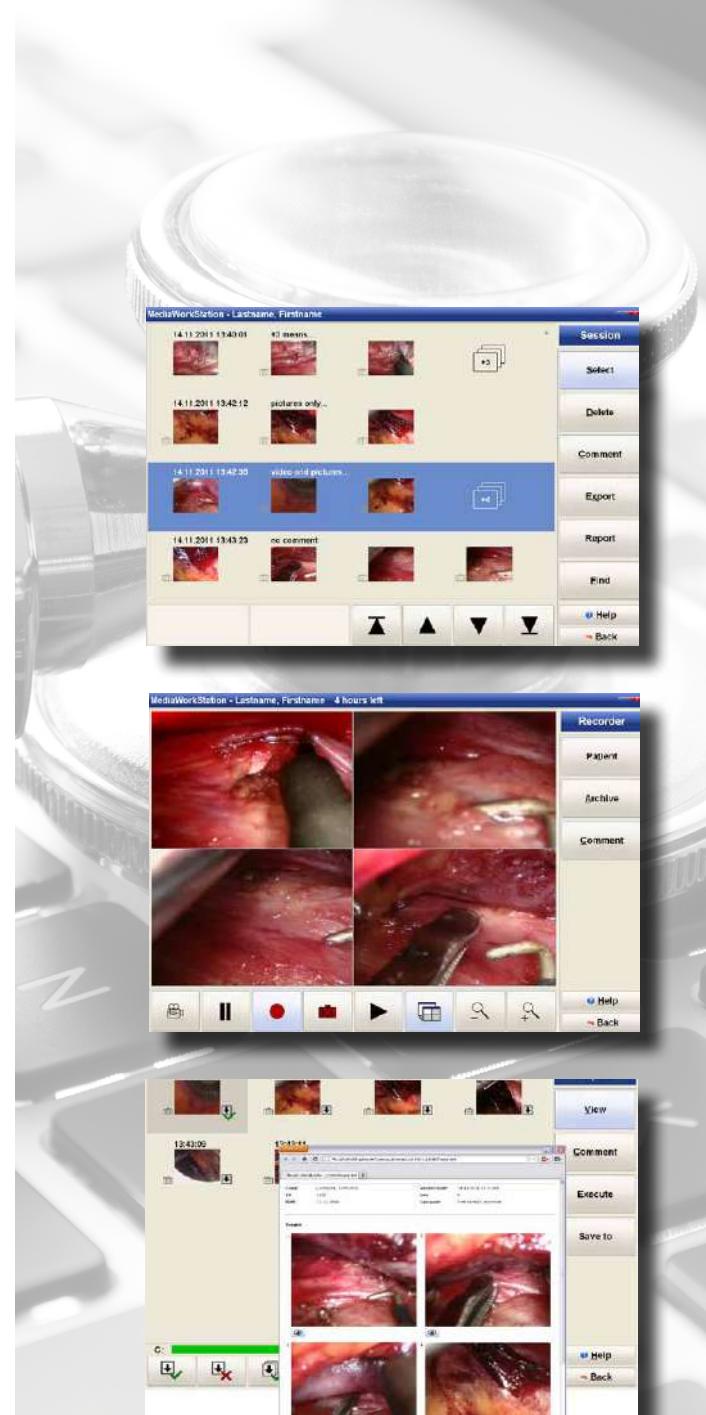



Karl Kaps - глобальная медицинская технологичная компания, предлагающая полный спектр решений по диагностике и лечению в таких областях как : оторинолорингология, офтальмология, микрохирургия, стоматология, гинекология и другие смежные области.

Мы нацелены обеспечить наших клиентов лучшим оборудованием для медицинского обслуживания пациентов. Это наша миссия и наш вклад - дать специалистам оборудование для постановки точного диагноза и проведения грамотной терапии.



Контактная информация

© 2016 Karl Kaps GmbH & Co. KG
All rights reserved

ВАША ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА – НАША ЦЕЛЬ